



## FREND™ System



FAST



EASY TO USE



ACCURATE

## 정확한 POCT PSA 정량 검사 **FREND PSA Plus**

3분 안에 tPSA 정량 결과를 확인할 수 있습니다.

빠른 검사 결과로 즉각적인 처치가 가능합니다.

전립선 질환의 스크리닝과 모니터링 목적으로 사용하실 수 있습니다.

환자의 만족도가 높아져 병·의원의 수익성 개선에 도움이 됩니다.

# FREND™ System

3단계 작동으로 대형 검사 장비 수준의 정확한 결과를 확인할 수 있습니다.  
별도의 준비 과정 없이, 장비의 전원을 켜 후 바로 검사를 하실 수 있습니다.  
장비의 조작과 관리가 간단하여 쉽게 사용하실 수 있습니다.

- 1분 30초면 장비와 함께 제공되는 Q.C Kit로 쉽게 정도 관리를 하실 수 있습니다.
- 최대 500개 까지 검사 결과의 저장이 가능하며, USB로 PC에 쉽게 데이터를 옮길 수 있습니다.  
(프린터와 연결하여, 검사 결과지를 출력하여 보관하실 수도 있습니다.)



## Test procedure



## 제품사양

### FREND™ PSA Plus


검사 원리	면역 형광법
측정 범위	0.1 ~ 25 ng/mL
검체 타입	Plasma or Serum
검체 용량	30 µL
검출 한계	0.1 ng/mL
측정 시간	최대 4 min.
포장 규격	25 tests
보관 온도	2 °C ~ 8 °C
유효 기간	12 개월

\* The specifications are subject to change without prior notice.

## 주문정보

FREND™ System	Cat# F10
FREND™ PSA Plus	Cat# FRPS 025

## Correlation graph

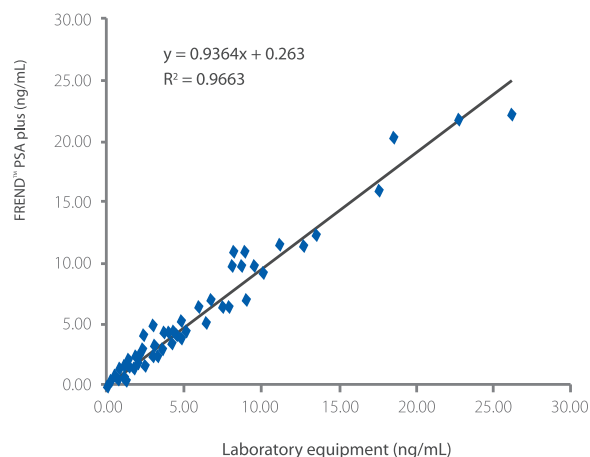

The  $R^2$  correlation value of FREND™ PSA plus is more than 0.96 against laboratory results.



NanoEnTek

e-mail [sales@nanoentek.com](mailto:sales@nanoentek.com)  
website [www.nanoentek.com](http://www.nanoentek.com)

NanoEnTek Inc. (HQ)

서울특별시 구로구 디지털로 26길 5 12층  
Tel. 02-6220-7986 Fax. 02-6220-7721